




WinCall Nurse 4.0

La communication hospitalière facilitée

La contrainte du temps de travail face à l'exigence de la qualité des soins impose des moyens souples et efficaces pour gérer et aménager rapidement l'organisation du personnel de soins dans les établissements de santé.

Le logiciel **WinCall Nurse** représente la solution idéale pour une gestion individuelle et conviviale des transferts d'appels d'urgence et des alarmes techniques ou de sécurité vers le personnel en service dans l'établissement.

La communication hospitalière est optimisée.

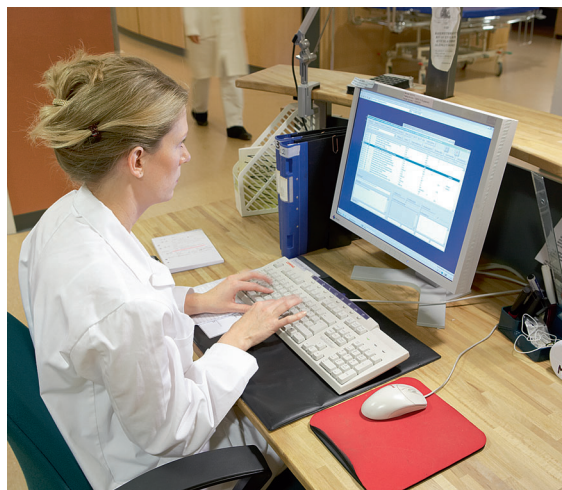

Le logiciel qui répond à toutes les attentes

WinCall Nurse est un logiciel entièrement conçu par Ascom pour le secteur de la santé. Outil de travail complet, il permet le transfert des appels infirmières **teleCARE** vers les systèmes de communication mobile Ascom intégrant la réception de messages alphanumériques, radiomessagerie **teleCOURIER**, portables émetteur/ récepteur **telePROTECT**, téléphones mobiles DECT **Ascom 9d** ou **Office 130** (via PABX Ascotel).



Facilité d'utilisation

La convivialité de **WinCall Nurse** permet son paramétrage et sa personnalisation en toute simplicité par l'utilisateur.

Ce dernier peut l'adapter en fonction de son propre environnement et avoir accès ainsi à la visualisation d'un ou plusieurs services.

L'utilisateur peut effectuer lui-même la programmation des transferts, personnaliser les libellés et définir une organisation jour / nuit propre aux réelles exigences de son établissement. Ainsi, les messages seront adressés vers les bonnes personnes ou groupe de personnes, en fonction du protocole d'intervention établi.

Rapidité et efficacité

Toutes les informations de **WinCall Nurse** sont visibles en un seul coup d'œil sur l'écran.

WinCall Nurse permet de visualiser la totalité d'un service et de son environnement.

Très souple et très ergonomique, le logiciel reçoit, analyse, affiche et traite les événements du système appel infirmières et des interfaces d'alarmes auxquels il est raccordé. Il offre une vue panoramique de l'état de chaque chambre dans les unités de soins (niveaux d'appels d'urgence et présences infirmières) et de chaque alarme.

Supervision d'inactivité

Associé à nos solutions d'appel infirmières teleCARE dans le but de garantir la qualité de services et de soins apportée aux résidents, **WinCall Nurse** dispose en version standard de la fonction de supervision d'inactivité en chambre appelée également «aide à la surveillance des patients».

The screenshot shows the WinCall Nurse software interface. At the top, there is a menu bar with options like 'Echier', 'Sécurité', 'Paramétrages', 'Jour/Nuit', 'Statistiques', and 'Aide'. Below the menu, there are several tabs: 'teleCARE SB/WL', 'teleCARE M / Ascotel', 'Que pour demo', and 'ascom'. The main area is divided into several sections, each representing a different floor or unit. Each section contains a grid of room numbers and their corresponding status. For example, the '2ème Etage Nord Bat. A' section shows rooms 10 through 19, and the '1er Etage Sud Bat. A' section shows rooms 430 through 439. The status of each room is indicated by a small icon or color. At the bottom of the interface, there is a section for 'AI Tech' (AI Technicians) with a grid showing their status for various units.

Fiabilité et traçabilité

WinCall Nurse est aussi un outil de supervision et d'aide à la décision et améliore ainsi la qualité des services aux résidents.

En enregistrant chaque événement, il fournit des informations permettant à l'administrateur de créer des statistiques (heures d'appel, origine de l'appel, heure d'acquit...).

La traçabilité des appels et des acquits constitue à la fois un élément de gestion interne et le constat d'un tiers pour les familles. Les informations sont stockées à l'infini et sont toujours consultables.

Adaptabilité

WinCall Nurse peut se coupler à la plupart des autres systèmes appels infirmières existants (nous consulter).

Ascom (France) SA

28, avenue de l'Île-Saint-Martin - 92024 Nanterre Cedex
Tél. : 0811 90 20 10 - Fax : 01 47 69 64 52
E-mail : info@ascomnira.fr - Web : www.ascomnira.fr

Les fonctions et les atouts de WinCall Nurse WinCN 4.0 est compatible Windows XP

Accès au logiciel

4 modes de fonctionnement

- Mode utilisateur
- Mode opérateur (mot de passe)
- Mode paramétrage (mot de passe)
- Mode système (mot de passe)

Personnalisation

- Des messages
- Des transferts
- De la fonction Jour / Nuit

Visualisation sur écran

- Des unités de soins
- Des chambres en appels / présences
- Des alarmes techniques
- Des alarmes de surveillance des patients
- De la liste du personnel
- Des groupes d'appels

Réception de messages

- Radiomessagerie - ascom teleCOURIER
- Téléphonie mobile DECT - Ascom 9d
- Portable Office 130 (via PABX Ascotel)
- Afficheur de couleur lumineux (jusqu'à 50 adressables)
- Possibilité de désactiver l'envoi d'appel vers les récepteurs et/ou les afficheurs

Fonction statistique : "Recherche"

- Mémorisation et stockage des événements (remplace l'imprimante)
- Enregistrement des changements Jour / Nuit et Marche / Arrêt système
- Recherche, analyse et tri des appels.
- Calcul de la durée d'appel, de la durée des présences

Possibilité d'exploitation des systèmes teleCARE SC, présence, carte teleTRACER RU, (pour les autres systèmes : nous consulter)

Configuration de la console :

Console de type PC uniquement
Pentium III / 350MHz / 512 MoRAM / 2000 Pro, XP (2000 conseillé)
Ecran SVGA 1024 x 768 / clavier / souris
Disque dur : 10 Mo disponible - 1, 2 ou 3 Ports COM RS232 disponibles en fonction des besoins - 1 port USB dispo (licence)